

安心感
No.1

YAGAMI

8年保証安心パック

耐用期間

8年

長期保証

8年

追加費用

0円



AED

自動体外式除細動器



8年分の消耗品交換サービスがついた
8年保証安心パック!
長期保証で長く安心して使用できます。



自動体外式除細動器 (AED)
サマリタンPAD350P
8年保証安心パック

5230800 **¥246,800** (税抜)

5230900 未就学児用
パッドバック付 **¥296,800** (税抜)



自動体外式除細動器 (AED)
サマリタンPAD450P
8年保証安心パック

5232400 **¥282,000** (税抜)

5232500 未就学児用
パッドバック付 **¥332,000** (税抜)

機器の仕様はP. 3に掲載 ▶▶


※ユーザー様が医療機関、消防機関、高齢者施設の場合、本パック対象外とさせていただきます。

耐用期間
8年

長期保証
8年

長く安心して使用できる
耐用期間・保証期間 **8年**

「真のコスト」を知るには長い目で

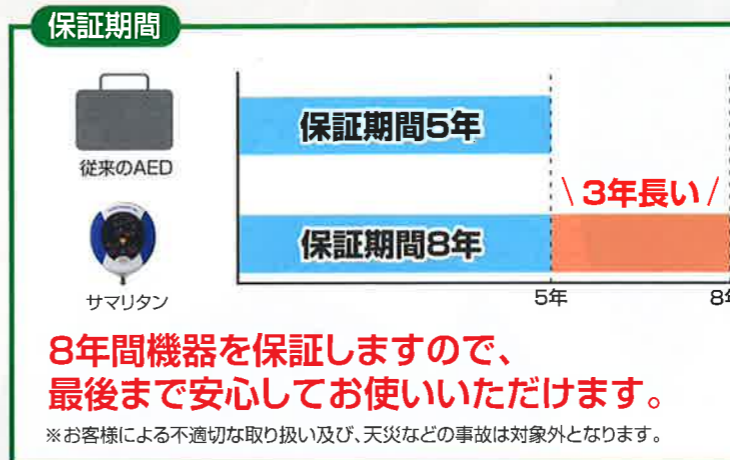


耐用期間・保証期間がともに8年なので、長く安心してお使いいただけます。またAEDのコストを考える場合、どのくらいの期間使用できるのかが重要なポイントです。ロングライフだからこそ、AED運用のトータルコストを抑えることができます。

「設置後」の悩み解消

追加費用
0円

消耗品定期交換サービス※ **完全保証**
万が一使用した場合の消耗品

8年保証安心パックには、定期交換分の消耗品が費用に含まれています。また、万が一AEDを使用した場合に必要な消耗品も費用に含まれているため、予算化は不要です。さらに、定期交換分の消耗品は交換時に自動送付するため、お客様による消耗品管理も不要です。

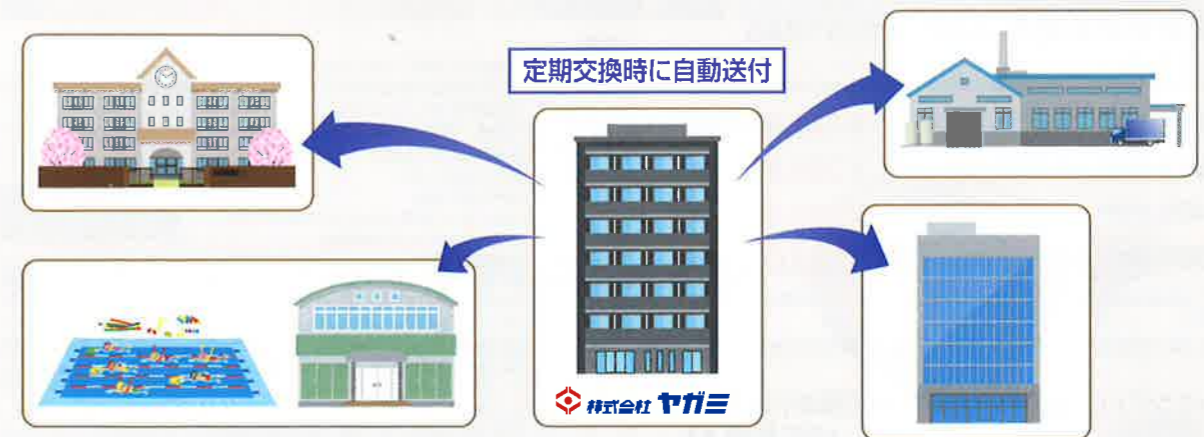

※消耗品定期交換サービス内容
8年分のバッテリーと電極パッドを当社にて有効期限管理のうえ交換時期に送付を行うほか、万一救命使用した場合は回数制限なく臨時交換いたします。
サービス料として、サマリタンPAD 350P/450Pは¥47,000(未就学児用パッドバック付の場合は¥72,000、いずれも税抜)が価格に含まれています。

手軽に持ち運べるコンパクトサイズ AEDのイメージを一新 サマリタンPAD 350P/450P



耐用期間 長期保証 追加費用
8年 8年 0円

耳マーク
サマリタンPAD 350P/450Pは、耳の不自由な方も
わかりやすく操作できるよう配慮した製品です。



450Pには、
CPRレートアドバイザー機能を
搭載しています



詳細はp5へ▶▶

自動体外式除細動器(AED) サマリタンPAD 8年保証安心パック

- 5230800 350P **¥246,800**(税抜)
- 5230900 350P 未就学児用パッドバック付 **¥296,800**(税抜)
- 5232400 450P **¥282,000**(税抜)
- 5232500 450P 未就学児用パッドバック付 **¥332,000**(税抜)

※ユーザー様が医療機関、消防機関、高齢者施設の場合、本パック対象外とさせていただきます。
※お客様による不適切な取り扱い及び、天災などの事故は対象外となります。

サマリタンPAD350P/450P(通信機能付)は
p6に掲載▶▶

忘れないで日常点検!

AEDは救急処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

<仕様>
波 形: 二相性(SCOPE™biphasic)
出力エネルギー:(成人)150J-150J-200J
シーケンス(未就学児)50J-50J-50J
充電時間: 代表値 150J<8秒 200J<12秒
除細動回数: 60回以上(200J時)
解析精度: IEC 60601-2-4
ガイダンス: 音声や光で指示
メモ リ: 内部メモリに記憶、90分のECGとイベント
パッドバック: 二酸化マンガンリチウム電池、
(電極+バッテリー) 交換期限約4年
防塵・防水保護: IP56
耐 衝 撃: MIL STD 810F Method 516.5 Procedure1 (40G's)
耐 振 動: MIL STD 810F Method 514.5+
Category4 Truck Transportation - US highways
Category 7 Aircraft - Jet 737 & General Aviation(Exposure)
動作温度: 0~50℃
保管温度: 0~50℃
大 き さ: 本体約20(縦)×18.4(横)×4.8(厚み)cm
キャリングケース: 22(縦)×20(横)×12(厚み)cm
重 量: 1.1kg(バッテリー含む)
CPRサポート機能: ベース音(110回/分)、CPRレートアドバイザー機能(450Pのみ)
そ の 他: 耳マーク(耳の不自由な方へ配慮した製品であることを示すマーク)付
付 属 品: 成人用パッドバック、キャリングケース、レスキューセット、
AEDステッカー、操作説明DVD、簡易操作説明書、取扱説明書
一般名称: 非医療従事者向け自動除細動器
医療機器分類: 高度管理医療機器-特定保守管理医療機器
医療機器承認番号: 22800BZ100030000(350P)、23000BZ100009000(450P)
北アイルランド製



消耗品交換サービスが付かない本体のみはこちら

自動体外式除細動器(AED) サマリタンPAD

- 5230700 350P **¥199,800**(税抜)
- 5232300 450P **¥235,000**(税抜)



※機器本体の耐用期間及び保証期間は8年です。
※定期交換時(4年に1回)や使用後の消耗品は別途購入が必要です。

補充品・別売品

成人用パッドバック(電極+バッテリー)		未就学児用パッドバック(電極+バッテリー)		ハートサインリュックサック	
5231000	¥37,000 (税抜)	5231100	¥25,000 (税抜)	5231400	¥9,200 (税抜)
一般名称: 体表用除細動電極 医療機器分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 13B1X10209000902 交換期限: 約4年		一般名称: 体表用除細動電極 医療機器分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 13B1X10209000903 交換期限: 約4年		重さ: 約900g	

コンパクトなボディに多くの特長を備えています

Point 1

気軽に持ち運べる約1kgのコンパクトボディ

ビジネスバッグに入るくらいのサイズで、重量はバッテリーを含め1.1kg。
設置場所や持ち運びに困ることはありません。



Point 2

ケースに入れたまますぐに使用可能

AEDを使用する場面では、迷わず正しく1秒でも早く電気ショックすることが求められます。
しかし、ほとんどのAEDは専用ケースから取り出さないと、電源ボタンを押すこともできません。
サマリタンPAD350P/450Pは、ケースに入ったままで電源ONから電気ショックまでの全ての操作が行えます。



次ページに続く▶▶

Point 3

高い防塵・防滴性能 IP56

船舶の上や埃の多い工事現場、悪天候で活動する救護隊など幅広い環境下で使用できます。



Point 4

音声と光で操作をサポート

次に何をすべきか、音声だけでなく光でも案内するので、耳の不自由な方にも配慮した設計になっています。また、機器の状態が正常な時は「緑色」、パッドパックの有効期限切れやバッテリーの電圧低下などの時は「赤色」で表示するインジケータ付です。




機器の状態を示すインジケータ

耳の不自由な方の使用にも配慮した設計
耳マーク
サマリタンPAD 350P/450Pは、耳の不自由な方もわかりやすく操作できるよう配慮した製品です。

Point 5

適正な胸骨圧迫をサポートする CPRレートアドバイザー機能 (450Pのみ)

突然の心肺停止患者に対しては、早期の電気ショックはもちろん、胸骨圧迫を適切に行うことが救命率だけでなく、社会復帰率を高めることに寄与するとされています。サマリタンPAD450Pは胸骨圧迫の適正テンポをメトロノーム音で示すだけでなく、胸骨圧迫を開始していない場合は「心肺蘇生を始めてください」と音声で案内することで、中断のない質の高い胸骨圧迫をサポートします。また、胸骨圧迫の回数を解析し、適切なテンポで胸骨圧迫が行われている場合はこまめに「良いテンポです」と救助者へフィードバックします。

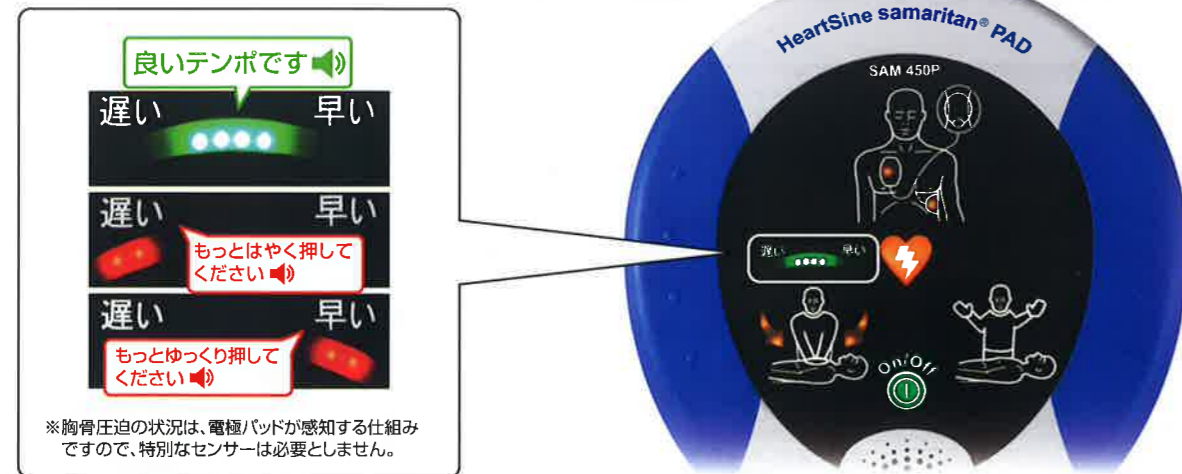

※胸骨圧迫の状況は、電極パッドが感知する仕組みですので、特別なセンサーは必要としません。

AEDトレーナーはp12に掲載▶▶

サマリタンPAD 350P/450Pの遠隔モニタリングを可能にしました



待機状態レポート
AEDの自己診断結果を確認できます。



設置場所(マップ)
設置場所を地図上で確認できます。



消耗品有効期限お知らせメール
消耗品の有効期限が90日以内になると、メールでお知らせします。

※遠隔モニタリング機能をご利用いただくには、日本ストライカー(株)が提供するウェブベースのAED活用支援プログラム「LLC(LIFELINKcentral)」への登録(無料)と、Wi-Fi環境が必要です。電波状況等によってはご利用いただけない場合がございますので、設置については別途お問い合わせください。

NEW

自動体外式除細動器 (AED)
サマリタンPAD 通信機能付 8年保証安心パック

5232900 350P	¥290,800(税抜)
5233000 350P 未就学児用パッドパック付	¥340,800(税抜)
5233200 450P	¥326,000(税抜)
5233300 450P 未就学児用パッドパック付	¥376,000(税抜)

※ユーザー様が医療機関、消防機関、高齢者施設の場合、本パック対象外とさせていただきます。
※お客様による不適切な取り扱い及び、天災などの事故は対象外となります。

◀◀サマリタンPADの仕様・特長はp3~5に掲載

医療機器
販売許可

消耗品交換サービスが付かない本体のみはこちら

自動体外式除細動器 (AED)
サマリタンPAD 通信機能付

5232800 350P	¥227,800(税抜)
5233100 450P	¥263,000(税抜)

※機器本体の耐用期間及び保証期間は8年です。
※定期交換時(4年に1回)や使用後の消耗品は別途購入が必要です。

医療機器
販売許可

補充品・別売品		
5231000 成人用パッドパック(電極+バッテリー)		¥37,000(税抜)
5231100 未就学児用パッドパック(電極+バッテリー)		¥25,000(税抜)
5233500 通信モジュール用電池セットCR123A		¥3,000(税抜)

通信モジュール「ゲートウェイ」がWi-Fi通信による遠隔モニタリングを可能にしました。特に複数台を管理する場合の点検のご負担を軽減します。



忘れないで日常点検!

AEDは救急処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

※消耗品定期交換サービス内容：8年分のバッテリーと電極パッドを当社にて有効期限管理のうえ交換時期に送付を行うほか、万一救命使用した場合は回数制限なく臨時交換いたします。サービス料として、¥63,000(未就学児用パッド/パック付の場合は¥88,000、いずれも税抜)が価格に含まれています。

表示価格は2019年5月現在の税抜価格です。

成人⇄小児のモード切替 スイッチが付いたAED

通信機能を内蔵! 遠隔モニタリングとデータ共有が可能です



CPRコーチング

電極パッドが胸骨圧迫の実施有無を検出します。胸骨圧迫が実施されていない場合は、音声ガイダンスで実施することを促します。



クイックステップ電極

赤いハンドルを引くだけで電極パッドを取り出せる最新設計を採用しています。

成人⇄小児モード切替

小児モードボタンを押すと小児モードに切り替わります。電極を取り換えずとも、小児に適した低いエネルギー量で通電されます(6歳未満の未就学児には小児モードを推奨)。

通信機能を内蔵

1.遠隔モニタリング

AEDの自己診断結果や消耗品の有効期限をPCやスマートフォンで確認できます。

※遠隔モニタリング機能をご利用いただくには、日本ストライカー(株)が提供するウェブベースのAED活用支援プログラム「LLC(LIFELINKcentral)」への登録(無料)が必要です。



2.データをクラウドに自動アップロード

AEDの作動状況やデータの共有を迅速に行い、スムーズな二次救命への連携を図ります。



※通信機能をご利用いただくには、Wi-Fi環境が必要です。電波状況によってはご利用いただけない場合がございますので、設置については別途お問い合わせください。

CU-SP1

成人⇄小児モード切替(セーフティガード付)

小学生以上は成人モード、未就学児(およそ6歳未満)は小児モードと、切り替えができます。成人/小児を設定した後に容易に変更されないよう、モード切替スイッチにはセーフティガードが付いています。



ステータスインジケータ


バッテリー残量、電極パッド期限、エラー状態を液晶画面にわかりやすく表示します。

オートボリューム(自動音量調整機能)

周囲の騒音に合わせて音声ガイダンスの音量が大きくなります。あらゆる使用場面を想定し、いかなる場面でも確実にガイダンスを伝えます。

CPRコーチング

iボタン(インフォメーションボタン)を押せば、必要に応じて的確な胸骨圧迫のリズムと音声ガイダンスでCPR手順をサポートします。

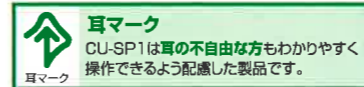

自動体外式除細動器(AED) iPad CU-SP1

5226100 ¥340,000(税抜)

波 形: 二相性波(e-cube Biphasic)
出力エネルギー: 定格150J
(成人: 負荷50Ωで公称150J, 小児: 負荷50Ωで公称50J)
充 電 時 間: 10秒以内
パ ッ テ リ: DC12V 4.2Ah 長寿命使い捨てバッテリー
(ディスポーザブルLiMnO2(バッテリー))
バッテリー容量: 約5年、電気ショック200回以上
メ ッ セ ー ジ: 音声メッセージ(自動音量調整機能付)
モ ー ド 切 替: 成人/小児モード切替スイッチ(セーフティガード付)
ガ イ ド 機 能: インジケータ3種(フラッシュライト機能付きイラスト表示)、CPRコーチング
インジケータ: 電極パッド期限/バッテリー残量/機器のエラー状態を表示
メ モ リ 機 能: 5件(1件につき3時間、合計15時間のイベント情報/ECG情報)、本体に保存
メ モ リ 転 送: SDカード 最大5件
赤外線無線通信(別売の管理ソフト赤外線アダプタセット必要)
最新のデータ1件のみ
セルテスト: 毎日、毎週、4週間毎、電源ON時、バッテリー装着時
(バッテリー残量、電極パッド、内部回路 等)
安 全 性: IP55(水の浸入に対する保護及び有害な粉塵に対する保護)
動 作 温 度: 0~50℃ 保管温度: 0~50℃
大 小 寸 法: 26(幅)×6.95(高さ)×25.6(奥行)cm
重 量: 2.4kg(バッテリー含む)
一 般 的 名 称: 半自動除細動器
医 療 機 器 分 類: 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
医 療 機 器 認 許 番 号: 22500BZX00338000
付 属 品: 両用電極パッド、大容量バッテリー、AED表示ラベル、SDカードリーダー、SDカード、操作説明DVD、取扱説明書
※キャリングケースは別売です。

補充品・別売品

両用電極パッド SP1-0A04 5226200 ¥9,800(税抜)	キャリングケース SP1-0A01 5226600 ¥15,000(税抜)
大容量バッテリーパック SP1-0A03 5226400 ¥36,000(税抜)	レスキューセット 4695600 ¥2,300(税抜)
データ管理ソフト CUExpert (ケーブル・アダプタ付) 5225600 ¥27,000(税抜)	

忘れないで日常点検!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

NEW

自動体外式除細動器(AED)ライフパック CR2

5233600 ¥365,000(税抜)

波 形: 二相性(ADAPTIVTMBiphasicテクノロジー採用)
出力エネルギー: (成人)200J, 300J, 360J
(小児)50J, 75J, 90J
通 電 時 間: CPR期間の終わりで58秒(代表値)以内に通電可能
除 細 動 回 数: 166回(200J時)もしくは103回(360J時)
または800分の動作時間 ※新品、満充電バッテリー使用時
解 析 精 度: IEC 60801-2-4
メ ッ セ ー ジ: 音声メッセージ
メ モ リ: 内蔵メモリに記憶、最低60分のECGとイベント
外 部 通 信: USBケーブル(付属)、Wi-Fi(2.4GHz)
パ ッ テ リ: 二酸化マンガンリチウム電池
防塵・防水保護: IP55
耐 衝 撃: MIL-STD-810F, Method 516.4, Procedure 1
(40g, 6-9 ms pulse, 1/2 sine each axis),
耐 振 動: MIL-STD-810F, Method 514.4,
Helicopter - category 6 (3.75 Grms)
Ground Mobile - category 8 (2.85 Grms)
動 作 温 度: 0~50℃
保 管 温 度: -30~60℃(最大1週間以内、電極/バッテリー込み)
大 小 寸 法: 約22.6(幅)×9.7(高さ)×27.4(奥行)cm
重 量: 2.0kg(電極/バッテリー含む)
CPRサポート機能: ベース音(104回/分)、CPRコーチング機能
モ ー ド 切 替: 小児モードボタン
付 属 品: 電極トレイ(1個)、USBケーブル、ソフトキャリケース、ショルダーストラップ、レスキューセット、オリエンテーションDVD、設置シール、取扱説明書
一 般 的 名 称: 非医療従事者向け自動除細動器
医 療 機 器 分 類: 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
医 療 機 器 認 許 番 号: 22900BZ100039000

補充品

クイックステップ電極(成人・未就学児共用) 5233800 ¥18,000(税抜)	使い捨てリチウムバッテリー 5233700 ¥30,000(税抜)
レスキューセット 4695600 ¥2,300(税抜)	

忘れないで日常点検!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。



受付カウンターの上に置いたり壁掛けしたり
設置方法を選択できるAEDホルダー!

AEDホルダー

6696000 AED-W ¥19,000(税抜)

AEDを設置する環境にあわせて、背面のスタンドで立て掛けたり、付属の固定金具を使って壁掛けもできます。

材 質: 鉄製、黒色塗装
大きさ: 25×40cm(AED収納面)
重 量: 約2kg
付属品: AED固定用ベルト(マジックテープ式)、壁面用固定金具



壁掛け

スタンドで立て掛け

AED収納ケース(壁面設置用) AED-C

4695700 ¥58,000(税抜)

大きさ: 約39.8(縦)×39.8(横)×19(奥行)cm
内 寸: 約34(縦)×34(横)×16(奥行)cm
材 質: フタ(扉)/プラスチック製、本体/金属製
付属品: 警報装置(本体取付済み)90dB/m
壁固定用ネジアンカー
AED設置表示パネル(21×25cm)
CPR手順説明パネル(A4判)
設置管理者表示シール

※壁面への設置には別途取り付け工事が必要です。



AED設置表示ステッカー

5210700 ¥2,500(税抜)

両面印刷シールなので、ガラス面に貼れば表裏
両側から確認できます。
5枚組(A5サイズ両面印刷)



AED設置表示パネル

5210800 ¥1,000(税抜)

21×25cm両面印刷



壁面固定用金具(AED設置
表示パネル用)

5210900 ¥2,400(税抜)

付属品: アルミアングル 1本
表示パネル取付用ネジ(ネット付) 2本
壁面固定用プラスチックアンカー 3本
壁面固定用ネジ 3本



遠くからでも設置場所がすぐわかる明るいカラーリングの収納ケース

AED収納ケース・スタンドセット AED-S

5210600 ¥116,000(税抜)

壁面への取り付けができない場所に最適な、AED収納ケースと専用スタンドのセットです。

扉にはAEDの状態が確認できる大型窓が付いています。
扉を開けると大きな警報音(約90dB/m)が鳴る警報装置を備えています。

大きさ(スタンドセット時): 約50(縦)×50(横)×157(高さ)cm
ケース取り付け高さ: 約82・77・72cmから選択可能(床面からケース下面まで)
材 質: 金属製(スタンド)
樹脂製(ケース扉)/金属製(ケース本体)
付属品: AED表示パネル1枚、AEDを用いる心肺蘇生法の手順パネル1枚、
AED管理者表示シール1枚、AED取り付け用ハンドル

point



AED管理者
表示シール付!
設置管理者及び、
機器点検記録を
記入できます。

扉を開けると大きな警報音
(約90dB/m)が鳴ります。

※デザインが変更になる場合があります。ご了承ください。

大型窓から
AEDの状態が
確認できます。

33(幅)×15(奥行)
×33(高さ)cm
までのAEDを
収納できます。



AED

自動体外式除細動器
を設置しています



設置例

ヤガミからのご提案

AEDは卒業記念や寄贈としても
ご採用頂いています。
収納ケース用名入れラベルを
ご用意できますので、
お問い合わせください。

【仕様】書 体:ゴシック体
カラー:黒一色
サイズ:19×6cm

※名入れ例



あきらめていた場所への設置が可能に!
電源不要でAEDを高温低温から守ります

NEW

電源レス屋外型AED収納ボックス

5234200 AED300KZ(壁掛式) ¥128,000(税抜)

AEDを屋外に設置できる電源不要の収納ボックスです。
配線工事が不要で、固定工事のみで設置が完了するのであらゆる場所への設置が可能です。

大 小 さい: 63(縦)×53(横)×34(奥行)cm(突起部を除く)※1
重 量: 21kg以下
材 質: スチール製、粉体焼付塗装
AED保管温度: 0℃以上(外気温が2晩続けて-5℃を下回らない場合)※2
(低温) -5℃以上(外気温が2晩続けて-10℃を下回らない場合)※2
AED保管温度: 50℃以下
(高温) (外気温が41℃未満、かつ日中の最高日射量が3.31MJ/m2未満の場合)※3
警告ブザー: 扉開時にブザー鳴動(100dB)、単4形乾電池2本使用
固 定 方 法: 壁面アンカーボルト固定
防水防塵性能: IP44

※1 デザイン、仕様により寸法が変更になる場合がございます。
※2 低温時のAED保管温度は日中の気温や日射量、その他気象条件により変動します。
※3 41℃:2017年8月現在での国内最高温度、3.31MJ/m2沖縄多照年の最高日射量です。



point

気密断熱構造により、
外気温が
ボックス内部に
伝わりにくい!

夏は夜の涼しさをキープし、冬は昼の暖かさをキープします。
また二重構造ボックスなので、真夏の直射日光の影響を受けにくい構造です。

※設置工事費、荷造運賃が別途必要です。

自立式(スタンド型)タイプもご用意できます。
最寄の弊社営業部署へお問い合わせください。
※床面アンカーボルトによる固定工事が必要です。

心肺蘇生(CPR)トレーニングに必要な機能だけを内蔵した簡易モデル

JAMY-P
電源不要



収納バッグ付

ウェア付

確実な実技が身につく、適正時のクリック音! (クリック音はON/OFF切り替え可能)



気道確保時に!
適正な気道確保時にクリック音が鳴り、動作の適否がわかります

胸骨圧迫時に!
胸骨圧迫時に(深さ約5cm)にクリック音が鳴ります

G2015対応

蘇生法教育簡易モデル JAMY-P

- 4696000 ¥23,800 (税抜)
- 4696100 5体セット ¥114,000 (税抜)
- 5214700 ウェア付 ¥24,800 (税抜)
- 5214900 ウェア付5体セット ¥119,000 (税抜)

呼吸吹き込み時には、生体のように胸部の上がり確認できます。
全長:約60cm 重量:約4.3kg(収納バッグ、付属品含む)
収納バッグの大きさ:約63(幅)×34(奥行)×22(高さ)cm
1体あたりの付属品:フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、
ディスポ肺気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、
キューマスク5個、収納バッグ、
専用ウェア(5214700及び5214900)

補充品 別売品

4696400	フェイスマスク(ソケットなし)	¥1,500 (税抜)
4697500	ディスポ肺・気道部一式(10セット組)	¥4,400 (税抜)
4697600	胸部表皮	¥4,500 (税抜)
5214800	JAMY-P専用ウェア	¥2,500 (税抜)

国産ならではの信頼と実績! わかりやすい表示器を備えたタイプ

JAMY-DSP



収納用ソフトケース

胸モデル

全身モデル

G2015対応

蘇生法教育人体モデル JAMY G2015 DSP

- 6698900 全身モデル ¥198,000 (税抜)
 - 6699000 胸モデル ¥173,000 (税抜)
- 全長、重量:6698900/約160cm、約10kg(収納ケース、付属品含む)
6699000/約70cm、約7kg(収納ケース、付属品含む)
収納ケースの大きさ:6698900/約98(幅)×50(奥行)×25(高さ)cm
6699000/約78(幅)×35(奥行)×25(高さ)cm
電源:AC100Vまたは単3形乾電池8本(別売)
付属品:フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、
ディスポ肺6枚(1枚は本体に装着済み)、
ディスポ気道部6個(1個は本体に装着済み)、
キューマスク10個、収納用ソフトケース、
ACアダプタ、ウェア上下一式(6698900のみ)

プリンタ搭載の高機能タイプもございます!

- 6699100 JAMY G2015 RECO 全身モデル ¥386,000 (税抜)
- 6699200 JAMY G2015 RECO 胸モデル ¥336,000 (税抜)

G2015対応

蘇生法教育乳児モデル(生後7~8ヵ月)

- 5211170 JAMYII-babyN ¥124,000 (税抜)

全長、重量:約70cm、約3.7kg(収納バッグ、付属品含む)
収納バッグの大きさ:約70.5(幅)×28.5(奥行)×17.5(高さ)cm
電源:AC100Vまたは単3形乾電池8本(別売)
付属品:フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、
ディスポ肺気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、
制御ユニット、ACアダプタ、収納バッグ



収納バッグ付

※ウェアの色は変更になる場合がございます。

表示器のない安価タイプもございます!

- 5226000 JAMYII-babyN Basic ¥73,000 (税抜)

2種類の異物除去訓練が行える幼児モデル

G2015対応

蘇生法教育幼児モデル(4才幼児)

- 4888170 JAMYII-i ¥158,000 (税抜)

異物除去訓練は、側胸部下部圧迫法と上腹部圧迫法(ハイムリック法)の訓練が行える機構となっています。

全長、重量:約105cm、約10kg(収納バッグ、付属品含む)
収納バッグの大きさ:約108(幅)×34.5(奥行)×21(高さ)cm
電源:AC100Vまたは単3形乾電池8本(別売)
付属品:ディスポ肺・気道部一式×5セット(1セットは本体に装着済み)、
キューマスク10個、模擬異物(発泡ポリエチレン)10個、
制御ユニット、ACアダプタ、収納バッグ



収納バッグ付

詳細は、ヤガミ救急資機材シリーズNo.25へ▶▶

いざという時にあわてないように、定期的なトレーニングが大切です!

G2015対応

JAMY-P・AEDトレーナーセット

- 5232200 350P-T ¥118,800 (税抜)
- 5232700 450P-T ¥118,800 (税抜)

〈セット内容〉
蘇生法教育人体モデル(JAMY-P)、
AEDトレーナー(350P-T又は450P-T)(充電式)



分売品・補充品

5231600	AEDトレーナー 350P-T	¥95,000 (税抜)
5232600	AEDトレーナー 450P-T	¥95,000 (税抜)
5231700	電極パッド 10組	¥9,000 (税抜)

G2015対応

JAMY-P・AEDトレーナーセット

- 5207800 CR-T ¥98,800 (税抜)

〈セット内容〉
蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)、AEDトレーナー(CR-T)(乾電池式)



分売品・補充品

5207500	AEDトレーナー CR-T	¥75,000 (税抜)
5207900	電極キット(電極パッド5組と接続ケーブル)	¥7,000 (税抜)
5207700	電極パッド 5組	¥4,000 (税抜)
5230400	リモコン	¥7,200 (税抜)

G2015対応

JAMY-P・AEDトレーナーセット

- 5224200 NFT2 ¥83,800 (税抜)

〈セット内容〉
蘇生法教育人体モデル(JAMY-P)、AEDトレーナー(NFT2)(乾電池式)

分売品・補充品

5224000	AEDトレーナー IPAD NFT2	¥60,000 (税抜)
5224100	電極パッド 1組	¥9,000 (税抜)


※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。

G2015対応

NEW JAMY-P・AEDトレーナーセット

- 5234300 CR2-T ¥141,800 (税抜)

〈セット内容〉
蘇生法教育人体モデル(JAMY-P)、AEDトレーナー(CR2-T)(乾電池式)

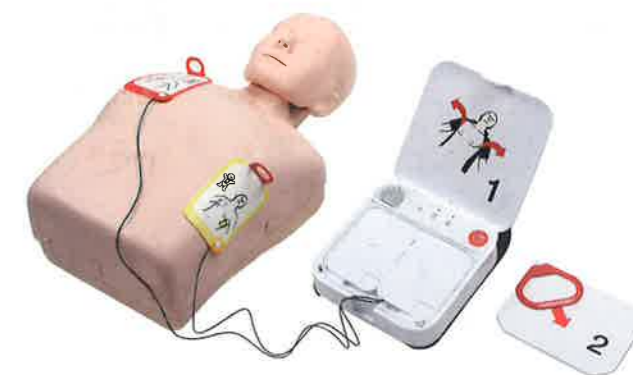

分売品・補充品

5233900	AEDトレーナー CR2-T	¥118,000 (税抜)
5234000	電極パッド 5組(センサ付)	¥30,000 (税抜)

G2015対応

JAMY-P・AEDトレーナーセット

- 5227600 CU-SPT ¥133,800 (税抜)

〈セット内容〉
蘇生法教育人体モデル(JAMY-P)、AEDトレーナー(CU-SPT)(乾電池式)



分売品・補充品

5226700	AEDトレーナー CU-SPT	¥110,000 (税抜)
5226800	電極パッド 1組	¥9,000 (税抜)



一次救命処置 (BLS) の手順

★本手順(イラスト図)は当社ホームページからダウンロードできます。

<https://aed.yagami-inc.co.jp>

STEP 1

傷病者
発見

STEP 2

反応の確認と
呼びかけ

「大丈夫ですか?」や「もしも」などと問いかけながら傷病者の肩をやさしく叩きます。



STEP 3

119番通報と
AED手配

傷病者に反応がない場合、「誰かきて!」と大声で人を集め、「あなたは119番に連絡してください」、別の人には「あなたはAEDを持ってきてください」と具体的に指示してください。



STEP 4

呼吸観察

傷病者の胸と腹部の動き(呼吸をするたび上ったり下ったりする)をみて、呼吸観察をします。胸と腹部が動いていなければ、呼吸が止まっていると判断します。



STEP 5

胸骨圧迫
(心臓マッサージ)

呼吸観察で心停止と判断したら、ただちに胸骨圧迫を開始します。胸の真ん中(左右の真ん中で、かつ、上下の真ん中)を目安にします。圧迫部位に片手の手掌基部を当て、他方の手を重ねます。重ねた手の指を組むと良いでしょう。重ねた手掌基部に体重をかけ、胸が約5cm沈み込むように強く圧迫します。また、1分間に100回~120回のテンポで可能な限り中断せずに、絶え間なく行います。



STEP 6

気道確保
人工呼吸
(省略可)

胸骨圧迫を30回続けたら、気道確保をして、人工呼吸を2回行います。息は傷病者の胸が上がるのが見てわかる程度の量を約1秒間かけて吹き込みます。




STEP 7

AED到着
<電源ON>

AEDが到着したら電源を入れ音声メッセージに従います。

※救助者が一人だけの場合、AEDを使用するには心肺蘇生を中断せざるを得ません。

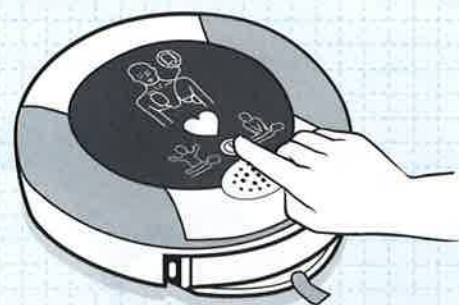


STEP 8

電極パッドを
貼る

電極パッドを取り出し、傷病者の胸に貼り付けます。

※救助者が二人以上いる場合は、電極パッドを貼る間も心肺蘇生を続けます。

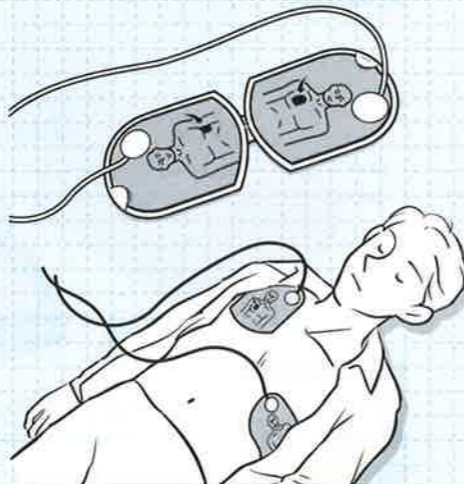

電極パッドは胸の右上(鎖骨の下で胸骨の右)と左下側(脇の下から5~8cm下、乳頭の斜め下)に貼付するのが標準的です。電極パッドは傷病者の肌にしっかり密着させます。電極パッドと肌の間に空気が入っていると電気がうまく伝わりません。

また、体毛の濃い傷病者に対してはAEDの効果が半減するばかりではなく、火傷の原因にもなります。本来貼り付ける位置に近い場所で胸毛の少ない場所があればそこへ貼り付けます。予備の電極パッドがあれば、予備の電極パッドで素早く胸毛ごと剥がしてから、新しい電極パッドを貼り直します。カミソリがある場合は、胸毛を剃ってから電極パッドを貼り付けます。

金属製のアクセサリは火傷を起こす危険性があります。外せるものは外しましょう。外すのに手間取る場合は、電極パッドからアクセサリをできるだけ遠ざけます。

貼り薬(ニトログリセリン、鎮痛剤など)や湿布薬が電極パッドを貼り付ける位置に貼られている場合はまずこれを剥がし、残っている薬剤をふき取ってから電極パッドを貼り付けます。

皮膚の下に心臓ペースメーカーや除細動器が埋め込まれている場合は、胸に硬いこぶのような出っ張りが見えます。電極パッド貼り付け位置にこの出っ張りがある場合、電極パッドは出っ張りを避けて貼り付けてください。

STEP 9

傷病者から
離れる

電極パッドが肌にしっかり貼り付けられると、機械が傷病者から離れるよう指示します。電気ショックを与える必要があるかどうかを判断するために、機械が自動的に心電図の解析を始めます。他の人が傷病者に触れていると正しい解析ができません。



STEP 10

ショック

心電図の解析が終わり電気ショックが必要と判断されれば、ショックボタンを押すように機械から指示が出ます。その指示に従ってショックボタンを押してください。この際も必ず他の人は傷病者から離れてください。直接傷病者に触れていると感電する危険があります。



STEP 11

胸骨圧迫
(心臓マッサージ)

電気ショックの後は、すぐに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開します。再開して2分経過したら、機械が傷病者から離れるよう指示を出し、再度心電図の解析を始めます。以後、機械のメッセージに従ってください。

到着した救急隊に引き継ぐまでは、電極パッドを剥がさずAEDの電源も入れたままにしておきます。状況や実施した応急手当、AEDによる除細動を加えた回数などを伝えます。意識が戻ってもAEDの電源や電極パッドは剥がさず救急隊が到着するまで、そのままにしておいて下さい。



傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ 一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品

<一方向弁付> 人工呼吸用携帯マスク

キューマスク

手袋ナシ	4889100(50個組)	¥11,500(税抜)
	4889300(10個組)	¥2,300(税抜)
手袋付	4889000(50個組)	¥12,500(税抜)
	4889200(10個組)	¥2,500(税抜)

材質:シート/ポリエチレン マウスピース部/ポリプロピレン
 大きさ:(キューマスク)16(縦)×14(横)cm
 呼吸逆流防止弁付 救命手当手順説明書付

**人工呼吸時の感染予防対策、
定番必需品として累計販売実績3,000万個突破!**

キューマスク/キューマスクfは、傷病者からの呼気などを逆流させない一方向弁と口への直接接触を防ぐソフトな感触の半透明シートを組み合わせた、人工呼吸時の感染予防補助用具です。装着しやすいマウスピース(一方向弁内蔵の突起部)は、マスクのズレを防ぎ、模擬人体や傷病者への確実な人工呼吸を可能にします。




※キューマスクの保管は直射日光のあたる場所、ダッシュボード上(車内)などへは放置しないようご注意ください。機能が低下する場合があります。

point



マウスピースに内蔵された一方向弁が威力を発揮。

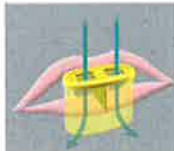

傷病者の口に挿入(装着)するため胸骨圧迫時の振動などによるマスクのズレ落ちがない。

point

傷病者の口元が確認でき、傷病者に直接触れることなく人工呼吸が可能。とっさの時も忘れないよう人工呼吸時の口のあて方を明記。



キューマスク用携帯ケース

4929002	ブルー (1個)	¥300(税抜)
4929502	ブルー (10個組)	¥3,000(税抜)
4929003	レッド (1個)	¥300(税抜)
4929503	レッド (10個組)	¥3,000(税抜)

※キューマスクは別売です。



ブルー

レッド

名入れを承ります

粗品や記念品などにご利用いただけるよう、ケースに有料で名入れが可能です。キューマスクfは100個から、携帯ケースは500個から可能です。価格などお問い合わせ下さい。



<一方向弁付> 人工呼吸用携帯マスク



キューマスク f (エフ)

4888000	オレンジ (10個組)	¥4,500(税抜)
5225000	クリアピンク (10個組)	¥4,500(税抜)
4888400	クリアブルー (10個組)	¥4,500(税抜)

専用ハードケース付のキューマスクです。
 ハードケースの大きさ:3.8(幅)×2.0(奥行)×4.8(高さ)cm、材質:TPX
 重さ:11.5g(キューマスク含む)



携帯例

取り出しワンタッチ

※本パンフレットの表示価格は、2019年5月現在のメーカー希望販売価格です。

★お問い合わせ・お申し込みは、下記の代理店へどうぞ



本社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目2番29号
 TEL(052)951-9251 FAX(052)951-6454
 東京支店 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目9番1号
 TEL(03)3915-2221 FAX(03)3917-2221
 大阪支店 〒547-0035 大阪市平野区西脇3丁目3番2号
 TEL(06)6702-9991 FAX(06)6702-9522
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4丁目5番7号
 TEL(092)471-1477 FAX(092)471-0237
 名北商品センター 〒485-0001 愛知県小牧市久保一色東1丁目18番地

★ホームページ: www.yagami-inc.co.jp